



FitMax™ Maschera Total Face

per ventilazione non-invasiva CPAP e bilevel




Critical Care ▪ Interfacce Paziente ▪ FitMax™ Maschera Total Face

FitMax™ Maschera Total Face

La maschera total face FitMax è una interfaccia per ventilazione non-invasiva monopaziente per terapia CPAP e bilevel di pazienti adulti (>30kg) in ambiente ospedaliero. Il design della maschera aiuta ad eliminare le lesioni al tessuto cutaneo nella zona nasale generalmente associate all'uso delle tradizionali maschere oronasali. FitMax è facile da posizionare e regolare, è disponibile in 3 misure adattandosi alla maggior parte dei pazienti.

E' disponibile in due varianti con diverso connettore, distinto con codice colore, per le diverse necessità cliniche. Un connettore arancio con valvola anti-asfissia e porta di scarico per l'impiego con circuiti a linea singola e un connettore standard blu per l'impiego con circuiti a doppia linea.

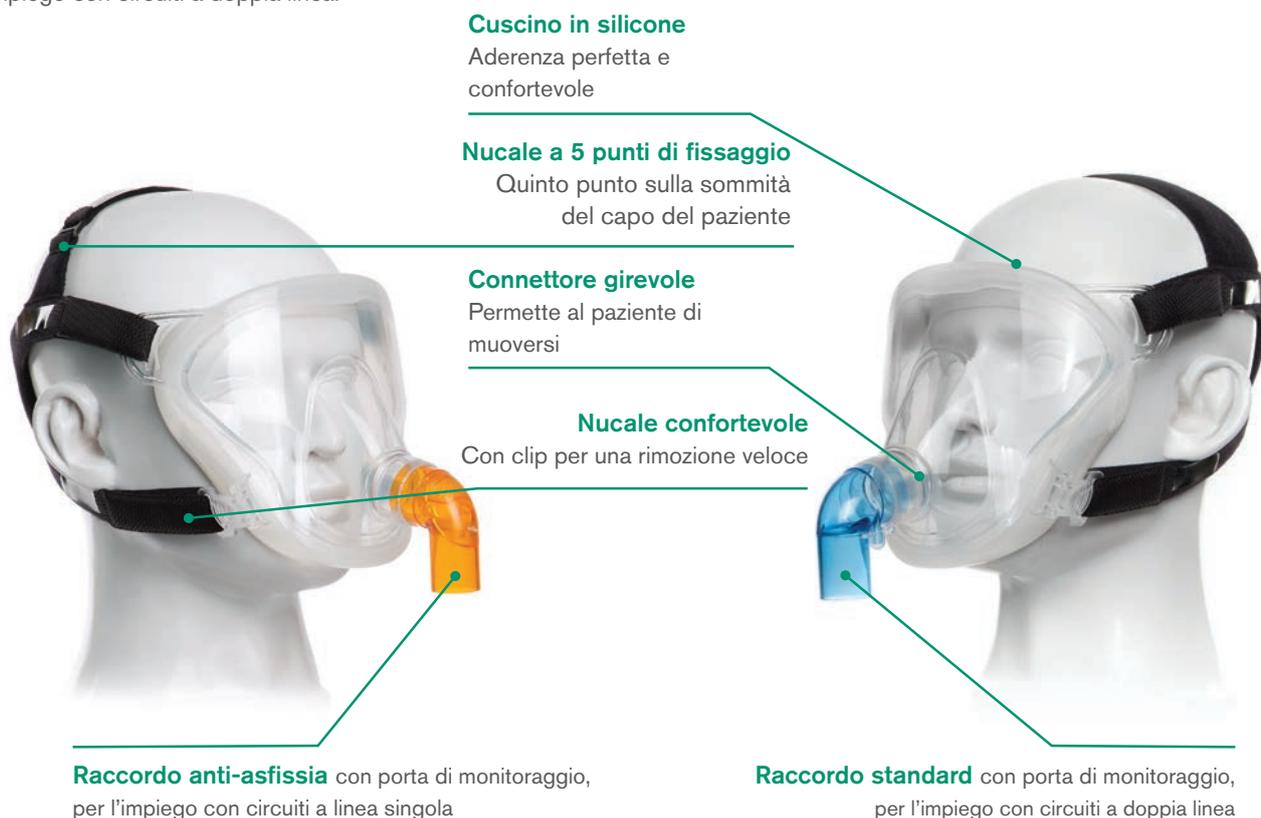

Cuscino in silicone

Aderenza perfetta e confortevole

Nucale a 5 punti di fissaggio

Quinto punto sulla sommità del capo del paziente

Connettore girevole

Permette al paziente di muoversi

Nucale confortevole

Con clip per una rimozione veloce

Raccordo anti-asfissia con porta di monitoraggio, per l'impiego con circuiti a linea singola

Raccordo standard con porta di monitoraggio, per l'impiego con circuiti a doppia linea

Codice	Descrizione	Codice colore	Q.tà/scatola
Per impiego con circuiti a linea singola			
2290020	FitMax maschera total face, con raccordo con valvola anti-asfissia, nucale, mis. Medium	●	10
2290030	FitMax maschera total face, con raccordo con valvola anti-asfissia, nucale, mis. Large	●	10
2290040	FitMax maschera total face, con raccordo con valvola anti-asfissia, nucale, mis. Extra Large	●	5
Per impiego con circuiti a doppia linea			
2290070	FitMax maschera total face, con raccordo standard, nucale, mis. Medium	●	10
2290080	FitMax maschera total face, con raccordo standard, nucale, mis. Large	●	10
2290090	FitMax maschera total face, con raccordo standard, nucale, mis. Extra Large	●	5

[Richiesta info](#)

Le maschere FitMax sono prodotte da Besmed Health Business Corporation, Taiwan e distribuite da Intersurgical Ltd



Distributore: Intersurgical SpA, Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
 T: +39 05353 20836 F: +39 0535 418 234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari

Fabbricante:
 Besmed Health Business Corporation

Rispetta l'ambiente!

Prima di stampare pensa al dispendio di energia e carta. Se desideri stampare ugualmente, privilegia il fronte/retro.



IS1.52_IT ▪ Issue 1 01.21