



i-gel[®] PLUS Resus Pack

L'evoluzione di i-gel[®]



Gestione delle Vie Aeree ▪ Dispositivi per la Gestione delle Vie Aeree



i-gel® Plus Resus Pack

In medicina d'urgenza occorrono dispositivi che siano affidabili, facili e veloci da usare. Il kit i-gel® Plus Resus Pack contiene tutto il necessario per preparare, inserire e fissare i-gel® Plus in modo rapido ed efficiente. Questo significa che non è necessario sgonfiare la cuffia prima dell'inserimento e nemmeno gonfiarla dopo il posizionamento per garantire la tenuta; in questo modo si riduce e semplifica la procedura di preparazione ed inserimento.

i-gel® Plus — miglioramenti nel prodotto


Il kit i-gel® Plus Resus Pack rappresenta un miglioramento rispetto ad i-gel® O₂ Resus Pack, perché include nel kit il nuovo dispositivo i-gel® Plus con i miglioramenti tecnologici che comporta.

Canale gastrico più ampio per migliorare la sicurezza del paziente

Il diametro del canale gastrico è stato aumentato per consentire l'inserimento di sondini di maggiori dimensioni e contribuire a migliorare la gestione del reflusso gastrico, riducendo notevolmente il rischio di aspirazione ed aumentando la sicurezza del paziente.

Nello schema sotto è evidenziata la differenza nella dimensione massima del sondino che può passare attraverso il canale gastrico per ciascuna misura di i-gel® Plus a confronto con i-gel® standard.

Misura	i-gel® standard	i-gel® Plus
3	12FG	16FG
4	12FG	18FG
5	14FG	18FG

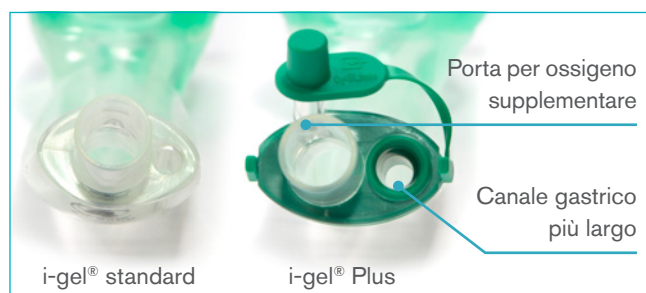

Il nuovo dispositivo include alcune funzionalità che erano già proprie del dispositivo i-gel® O₂. Una porta per ossigeno supplementare per la somministrazione passiva di ossigeno nell'ambito di un protocollo di rianimazione cardiocerebrale (CCR) ed un anello uncinato integrato con codice-colore, progettato per l'uso con l'apposita cinghia di fissaggio per fornire un metodo alternativo di fissaggio del dispositivo.


Inserimento

i-gel® Plus è incredibilmente facile da usare. La semplicità d'uso di i-gel® Plus si traduce in una tecnica di inserimento istintiva ed affidabile, eliminando la necessità di introdurre le dita o i pollici all'interno della bocca del paziente.

Il dispositivo i-gel® Plus è stato progettato per facilitare la ventilazione, in linea con i protocolli standard di rianimazione stabiliti da ERC (European Resuscitation Council) e da AHA (American Heart Association). Inoltre, i-gel® Plus è dotato di una porta supplementare per l'ossigeno per l'erogazione di ossigenazione passiva in conformità dei protocolli di rianimazione cardio-cerebrale (CCR).


Nuova rampa di intubazione per ottimizzarne l'uso come condotto per intubazione

E' stata integrata una rampa per l'intubazione, posizionata all'estremità del canale gastrico, nel centro della cuffia non gonfiabile, per ottimizzare la sicurezza e l'uso del dispositivo come condotto per l'intubazione (con guida a fibra ottica). Il tubo tracheale esce così da i-gel® Plus ad una angolazione ottimale per consentire un passaggio affidabile e sicuro attraverso le corde vocali e nella trachea.

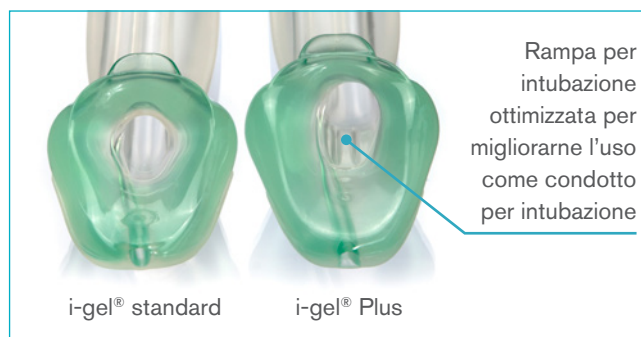

Punta della cuffia più lunga, migliore tenuta esofagea

i-gel® Plus è caratterizzato dalla punta della cuffia leggermente allungata. Questa miglioria è volta ad ottenere una maggiore tenuta esofagea e, insieme al canale gastrico più largo, offrire una maggiore sicurezza nel prevenire le aspirazioni.

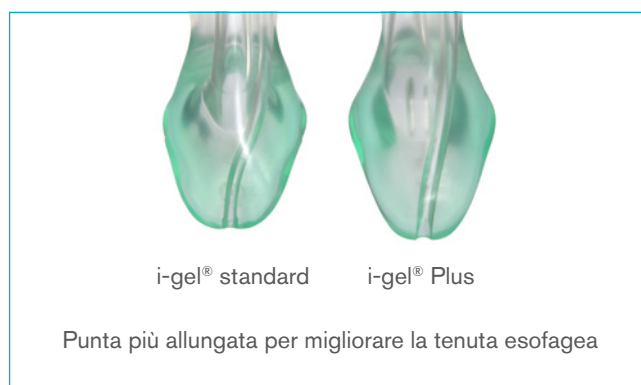



i-gel® Plus Resus Pack — caratteristiche e benefici

Connettore da 15mm

Connessione sicura a qualsiasi catetere Mount o altro connettore standard

Anello uncinato con codice-colore

Per fissare i-gel® Plus in posizione con la cinghia di fissaggio

Estremità prossimale del canale gastrico

Informazioni prodotto chiare e visibili

Per un chiaro riferimento visivo. Comprendono conferma della misura e guida al peso

Guida di posizionamento

Canale gastrico più largo

Consente il passaggio di sondini di varie dimensioni

+ Novità i-gel® Plus

Rampa di intubazione

Per ottimizzarne l'uso come condotto per intubazione

+ Novità i-gel® Plus

Punta della cuffia più lunga

Aiuta a migliorare la tenuta esofagea

+ Novità i-gel® Plus

Porta per ossigeno supplementare

Per somministrazione passiva di ossigeno nell'ambito di un protocollo di rianimazione cardiocerebrale (CCR)

Canale gastrico

Aumenta la sicurezza del paziente in caso di rigurgito

Bite block integrato

Riduce la possibilità di occlusione del canale delle vie aeree

Stabilizzatore del cavo orale

Facilita l'inserimento ed elimina il potenziale rischio di rotazione

Sostegno per l'epiglottide

Riduce la possibilità di "ripiegamento" dell'epiglottide determinando un'ostruzione delle vie aeree

Cuffia non-gonfiabile

La cuffia è realizzata con materiale esclusivo ed estremamente morbido simile al gel. Elimina la necessità di gonfiaggio della cuffia dopo l'inserimento, rende più facile, veloce e sicura l'operazione

Estremità distale del canale gastrico

Il kit i-gel® Plus Resus Pack è disponibile in 3 misure adulto e include:

- Nuovo dispositivo sovraglottideo i-gel® Plus
- Bustina di lubrificante — per una pratica e veloce lubrificazione di i-gel® Plus prima dell'inserimento
- Cinghia di fissaggio — per fissare i-gel® Plus in posizione
- Tubo di aspirazione 16 FG — per l'inserimento attraverso il canale gastrico e svuotare i fluidi dallo stomaco





Innovazione nella gestione delle vie aeree dal 2007

i-gel®, l'originale dispositivo sovraglottideo di seconda generazione con cuffia non-gonfiabile, è stato lanciato sul mercato da Intersurgical nel 2007. i-gel® è stato il primo grande sviluppo tecnologico dopo l'introduzione della maschera laringea ed ha cambiato il volto della gestione delle vie aeree ed oggi è ampiamente utilizzato in anestesia e rianimazione in tutto il mondo. i-gel® prende il nome dal morbido materiale simile ad un gel con cui è realizzato.

L'innovativa applicazione di questo materiale ha permesso di realizzare una cuffia unica, che non necessita di gonfiaggio dopo l'inserimento. Grazie a questa caratteristica il procedimento di inserimento del dispositivo è semplice, rapido e costantemente affidabile. Il kit i-gel® Plus Resus Pack è l'ultima novità nella gamma i-gel®.

Fissaggio

Il kit i-gel® Plus Resus Pack include una cinghia di fissaggio appositamente progettata per mantenere in posizione il dispositivo i-gel® Plus. Il fissaggio si ottiene velocemente facendo scorrere la cinghia sotto il collo del paziente e assicurandola all'anello uncinato del dispositivo. Questo metodo è un'opzione ideale nei casi in cui il nastro non sia utilizzabile, come ad esempio, nei pazienti con barba.



Informazioni per l'ordine

Il kit i-gel® Plus Resus Pack contiene un dispositivo i-gel® Plus, una bustina di lubrificante, una cinghia di fissaggio e un tubo di aspirazione; tutto racchiuso in una speciale confezione rigida, trasparente e sterile. Questo confezionamento dal design esclusivo garantisce la protezione del contenuto sia in fase di trasporto che di stoccaggio. Il dispositivo i-gel® Plus ha un anello uncinato con codice-colore che permette una rapida e semplice individuazione della misura nonché un fissaggio veloce e sicuro della cinghia. Il kit i-gel® Plus Resus Pack è disponibile in 3 misure per paziente adulto. Il kit i-gel® Plus Resus Pack è fornito in confezioni da 6 unità.



Codice	Descrizione	Colore	Peso	Q.tà/scatola
8805000	i-gel® Plus Resus Pack, adulto Large – include i-gel® Plus misura 5 con anello uncinato arancio, bustina di lubrificante, nucale, tubo di aspirazione 16FG	Arancio	90+ kg	6 
8804000	i-gel® Plus Resus Pack, adulto Medium – include i-gel® Plus misura 4 con anello uncinato verde, bustina di lubrificante, nucale, tubo di aspirazione 16FG	Verde	50–90 kg	6 
8803000	i-gel® Plus Resus Pack, adulto Small – include i-gel® Plus misura 3 con anello uncinato giallo, bustina di lubrificante, nucale, tubo di aspirazione 16FG	Giallo	30–60 kg	6 

Per ulteriori informazioni visita il sito www.intersurgical.it/info/igel



Nota: il tubo di aspirazione contiene PVC

IS6.25_IT • Issue 1.1 04.26



Distribuito da: Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il produttore Intersurgical Ltd è certificato
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO
13485:2016 e MDSAP

Materiale informativo destinato
esclusivamente ad operatori sanitari.

Ricordati di riciclare 