



Intersurgical EcoLite™

Maschera per ossigeno ad alta concentrazione

La maschera estremamente leggera e comoda



Ossigeno e Aerosol Terapia ▪ Ossigeno Terapia



Intersurgical EcoLite™ maschera per ossigeno ad alta concentrazione

Benvenuti nella Comfort Zone

L'esclusivo design e i materiali utilizzati nella produzione della maschera EcoLite offrono un eccezionale comfort per il paziente e un ridotto impatto ambientale.

Confortevole per il paziente

Il miglioramento del comfort e della sicurezza del paziente sono stati gli elementi principali nello sviluppo di questa gamma. Le più recenti tecnologie produttive ci hanno permesso di realizzare un prodotto che combina due materiali non-PVC: il polipropilene costituisce il guscio della maschera EcoLite ed è trasparente, leggero e rigido a sufficienza per mantenere la forma della maschera, mentre il secondo materiale, il TPE, è più morbido e viene utilizzato per la sigillatura, a contatto con il volto del paziente.

▶ Video disponibile su www.intersurgical.it

Tenuta nasale incurvata

Si adatta a forme differenti del naso così da evitare che i farmaci nebulizzati fuoriescano negli occhi del paziente

Nessuna clip metallica

Compatibile con RMN

Due valvole di sicurezza integrate

Permette al paziente di respirare aria ambientale in caso di mancanza di ossigeno

Posizionamento "sopra il mento" o "sotto il mento"

Fornisce una tenuta efficace e maggiore adattabilità a una più ampia conformazione di visi

Confortevole per l'ambiente

La maschera EcoLite costituisce una parte importante della nostra gamma Eco, progettata per dimostrare la nostra continua attenzione allo sviluppo sostenibile. L'uso del PVC nei prodotti medici e il suo impatto sull'ambiente sono stati spesso messi in discussione. Nella produzione della maschera EcoLite, il PVC è stato sostituito da materiali alternativi riducendo quindi l'impatto ambientale.



Scopri la gamma Eco range

www.intersurgical.com/info/eco

Tenuta morbida

Migliore comfort per il paziente

Posizionamento dell'elastico sopra o sotto le orecchie



Per evitare i traumi dietro le orecchie

Maschera trasparente


Consente di avere una chiara visuale sul naso e sulle labbra del paziente

Sigillatura efficace

Concentrazioni di ossigeno più elevate

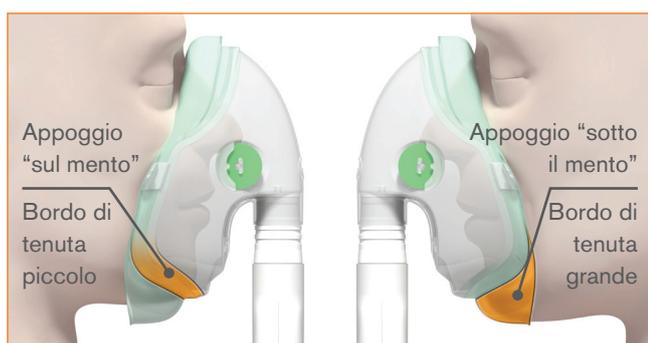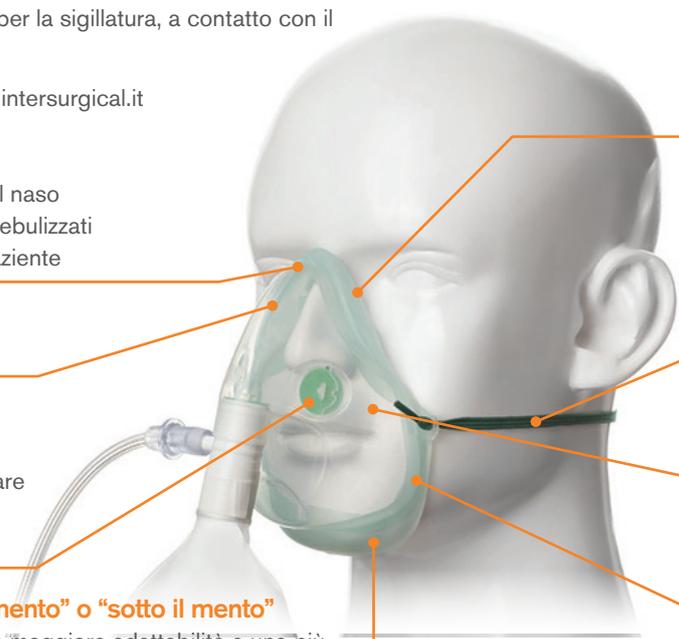

Percentuale di ossigeno erogata con la maschera EcoLite™ in confronto alle maschere in PVC ad alta concentrazione

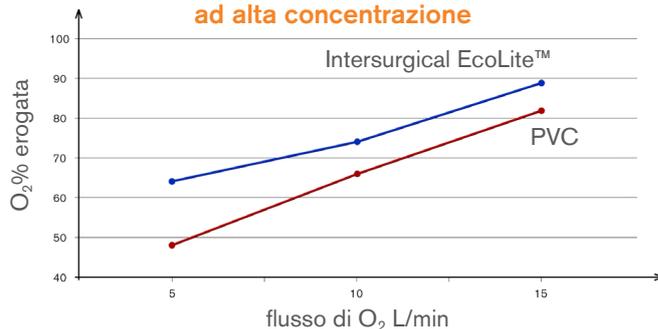

| Codice | Descrizione | Lunghezza tubo | Q.tà/scatola |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1181015 | EcoLite, maschere per ossigeno ad alta concentrazione con tubo, adulto | 2.1m | 24 |
| 1192000 | EcoLite, maschera per ossigeno ad alta concentrazione con tubo, pediatrica | 2.1m | 40 |

Prodotto a basso impatto ambientale



Intersurgical S.p.A., Via Tonino Morandi 12 - 41037 Mirandola (MO) - ITALIA
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it



Il fabbricante Intersurgical Ltd è certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015

